

ルシェロ フロッサーの特長

特長 1 前歯も奥歯もフロッシングしやすい マルチアングルのフロスヘッド

フロスヘッドは360°回転し、30°ごとに角度を変えられるマルチアングル設計。使いやすいアングルに合わせることができるので、より簡単、スムーズなフロッシングが可能です。



特長 2 いつも清潔&エコな 交換できるフロスヘッド

ヘッドのみ交換でき、使い捨てができるのでいつも清潔&エコ。30個1函(約1ヶ月分)の付け替え用フロスヘッドも用意しています。




特長 3 奥歯までラクに届くロングハンドル

フロスが届きにくい奥歯にも、ロングハンドルがラクに届き、初心者でも簡単に奥歯のフロッシングができます。お子さんのケアの仕上げにもオススメです。



特長 4 歯間のきつさに合わせて選べる 2種類のフロス

M(ふつう)とS(ほそめ)の2種類の太さがあります。歯間のきつさに合わせて使い分けてください。

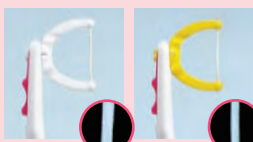

M(ふつう) ホワイト S(ほそめ) イエロー 拡大写真

特長 5 効率良くプラーク(歯垢)を除去できる フロスヘッドの適度なたわみ

フロスヘッドの適度なたわみにより歯の側面にフロスがしっかりフィットするので効率的なプラーク除去ができます。



POINT!! <デンタルフロスの選び方> ルシェロ フロッサーとルシェロ フロスの違いは?

ルシェロ フロッサー	ルシェロ フロス (指巻きフロス)
<ul style="list-style-type: none"> ・デンタルフロスが初めての方に ・ルシェロ フロス(指巻きフロス)を上手に使用できない方に ・お子さんの仕上げ磨きをされている方に ・お子さんのセルフケアに ・短時間で手軽にフロッシングしたい方に 	<ul style="list-style-type: none"> ・指巻きのフロッシングができる方に ・歯面の感触を指で確認しながら操作したい方に ・より高いプラーク除去効果を求める方に ・低コストでケアしたい方に

デンタルフロスが初めての方でも簡単! 歯ブラシ感覚で手軽に使えるハンドル付デンタルフロス



ルシェロ フロッサー
【内容】
ハンドル(ピンク/グリーン) 1本
フロスヘッド 7個
(フロス太さ: M ホワイト/S イエロー)
【材質】
フロス: 高強度 PE フロスヘッド: PP
ハンドル: PP, TPR (熱可塑性ゴム)
【耐熱温度】 80℃
【希望患者価格】 1セット=¥500 (税込)

いつも清潔&エコ。 毎日使っても1ヶ月使用できる付け替え用フロスヘッド



ルシェロ フロッサー フロスヘッド
【内容】
フロスヘッド 30個 (10個×3)
(フロス太さ: M ホワイト/S イエロー)
【材質】
フロス: 高強度 PE フロスヘッド: PP
【耐熱温度】 80℃
【希望患者価格】 1函=¥500 (税込)

より詳しい使い方など情報満載の専用ホームページ「歯とお口の健康情報」もご覧ください。

<http://www.gcdental.jp/floss/>

- 「ハンドル交換について」
新品のフロスヘッドを付けてもヘッドにぐらつきが見られたり、ロックに緩みが見られる際にはハンドルを新しいものに交換してください。
必要以上にヘッドを回転させると固定が弱まることありますのでご注意ください。
※掲載の希望患者価格とジーシー研究所測定の実データは、2011年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ruscello

ruscello®

the dental flosser on P4 concept

flosser ハンドル付デンタルフロス
ルシェロ フロッサー

歯ブラシ感覚で使えるデンタルフロス、ルシェロ フロッサー





ruscello®
the dental flosser on P4 concept

flosser

デンタルフロスはなぜ必要？

デンタルフロスとは、歯ブラシでは届かない狭い歯間（歯の側面）を清掃できる糸状の清掃用具で、指に巻き付けて使用するタイプと、ハンドル付タイプの2種類があります。歯ブラシでは、歯間や歯周ポケット（歯と歯肉の間の溝）までブラシが行き届きにくいので、プラーク*を取り残してしまいます。プラークをそのままにしておくと、むし歯や歯周病の原因に。歯や歯肉を健康に保つためには、毎日のブラッシングとあわせて、デンタルフロスによりプラークをかきとる歯間のケア（フロッシング）が大切です。



※プラークとは…

食べかすに含まれる糖を栄養源に繁殖した細菌のかたまりで、むし歯や歯周病の一番の原因です。

取り残したプラークを放っておくと、こんな危険性があります



歯周病


プラーク中の細菌により歯を支える組織に炎症が起きる病気です。歯肉の腫れや出血に加え、悪化すると歯を支える骨が溶けて最終的には歯が抜けてしまいます。

むし歯

プラーク中の細菌が糖を分解して酸ができます。その酸が歯を溶かすのがむし歯です。はじめは痛みがありませんが、悪化すると穴があき痛みがでてきて、歯の寿命が短くなる可能性が高くなります。

フロスヘッドの着脱方法

フロスヘッドの付け方

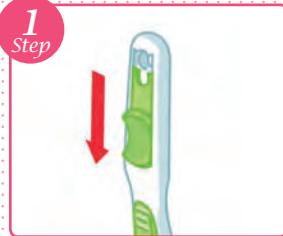

1 Step
スライドロックが下りていることを確認してください。



2 Step
フロスヘッドを縦向きにカチッと音がするまで押し込みます。



3 Step
スライドロックを止まるまで押し上げてフロスヘッドを確実に固定します。



ロックしたままヘッドの角度を自由に変えられます。

正しく「ルシェロ フロッサー」を使用いただくために。

確実にフロスヘッドのロックをおこなってからご使用ください。



しっかりロック




ロックされていない

フロスヘッドの外し方



1 Step
フロスヘッドを縦向きにします。

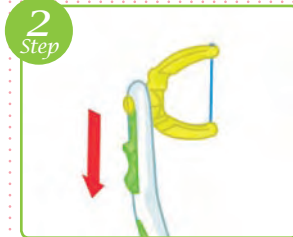

2 Step
スライドロックを下ろします。



3 Step
ハンドル後ろの突起を押し、フロスヘッドを下方に倒しながら抜きます。

フロスヘッドのアングルの選び方例



たて



前歯

前歯はフロスヘッドをたてにすると、操作がよりシンプルで簡単。




よこ



奥歯

フロスヘッドを横にすると、フロッシングが難しい奥歯も簡単。

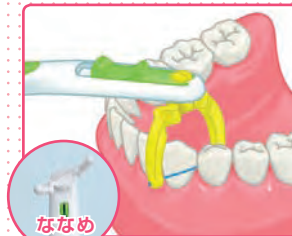

ななめ



犬歯の奥など

フロスヘッドを斜めにするると犬歯の奥や歯並びの悪い所も簡単。

フロッセアの使い方



挿入の仕方

のこぎりの刃を小さく引くように動かしながら歯間に通します。抜く時も同様に動かしながら抜きます。

動かし方

歯の側面に沿わせながら上下させてプラークをかき取ります。

どのような持ち方でも手になじむハンドル



お子さんの仕上げみがきにも!

