

GC

EOM-Σ

DENTAL UNIT

EOM-Σ 55 new
SLIDING DELIVERY & STEP CHAIR

EOM-Σ 05 new
OVER ARM & STEP CHAIR

EOM-Σ 5C
SLIDING DELIVERY & CONTOURED CHAIR

EOM-Σ 0C
OVER ARM & CONTOURED CHAIR





E (Ergonomicー人間工学的な)・O (Organicー有機的な)・M (Multiformー多様な)をコンセプトに、人間工学に基づいた有機的なデザインと、多様化する診療形態を追究したイオムシリーズ。スタイリングや機能はもちろん、衛生面に徹底して配慮するなどつねに最新歯科医療のニーズに対応し、最新鋭デンタルユニットとして進化してまいりました。そしていま、イオムシリーズの集大成ともいふべき未来型デザインと高機能を搭載して「イオム シグマ」が登場しました。それぞれの診療形態に合わせて選択いただけるセレクト品とオプション品を豊富にラインナップしてニーズの多様性にさらに対応。先生独自のユニット構成が可能ですので、快適で効率的な診療が行えます。「イオム シグマ」は、すべてのデンタルスタッフと患者さんにHigh Gradeな診療環境を提供するデンタルユニットです。

get near future dental unit

EOM・Σ

EOM・Σ SS

SLIDING DELIVERY & STEP CHAIR



写真はイオム SS イオムオリジナルセットです。

イオム SS ベーシックモデル

¥3,800,300

(取付料別)

- ・イオム SS 本体セット2ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR(ライトなし)
- ・イオム ライト ユニットタイプ
- ・フットコントローラー(円形タイプor2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコックor噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・イオム ステップチェア

イオム SS イオムオリジナルセット ¥4,100,000

(取付料別)

- ・イオム SS 本体セット3ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドSL(ライト/カプリング付)
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR/4000Asi(各ライトなし)
- ・イオム ライト ユニットタイプ
- ・フットスイッチ
- ・フットコントローラー(円形タイプor2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコックor噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・デンタルフィルムビューアー
- ・イオム ステップチェア

EOM・Σ os

OVER ARM & STEP CHAIR



写真はイオム OS イオムオリジナルセットです。

イオム os ベーシックモデル

¥3,620,300

(取付料別)

- ・イオム OS 本体セット2ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カブリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR(ライトなし)
- ・イオム ライトO ユニットタイプ
- ・フットコントローラー(円形タイプ or 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコック or 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・イオム ステップチェア

イオム os イオムオリジナルセット ¥3,940,000

(取付料別)

- ・イオム SS 本体セット3ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドSL(ライト/カブリング付)
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カブリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR/4000Asi(各ライトなし)
- ・イオム ライトO ユニットタイプ
- ・フットスイッチ
- ・フットコントローラー(円形タイプ or 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコック or 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・デンタルフィルムビューアー
- ・トレーL
- ・イオム ステップチェア

EOM・Σ SC

SLIDING DELIVERY & CONTOURED CHAIR



写真はイオム SC イオムオリジナルセットです。

イオム SC ベーシックモデル

¥3,680,300

(取付料別)

- ・イオム SC 本体セット2ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR(ライトなし)
- ・イオム ライト ユニットタイプ
- ・フットコントローラー(円形タイプ or 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコック or 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・イオム カンターチェア

イオム SC イオムオリジナルセット ¥3,980,000

(取付料別)

- ・イオム SC 本体セット3ハンドピース仕様
- ・イオムタービンクリーンヘッドSL(ライト/カプリング付)
- ・イオムタービンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR/4000Asi(各ライトなし)
- ・イオム ライト ユニットタイプ
- ・フットスイッチ
- ・フットコントローラー(円形タイプ or 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコック or 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・デンタルフィルムビューアー
- ・イオム カンターチェア

EOM・Σ oc

OVER ARM & CONTOURED CHAIR



写真はイオム OC イオムオリジナルセットです。

イオム oc ベーシックモデル

¥3,500,300

(取付料別)

- ・イオム OC 本体セット2ハンドピース仕様
- ・イオムターピンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR(ライトなし)
- ・イオム ライトO ユニットタイプ
- ・フットコントローラー(円形タイプor 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコックor 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・イオム カンターチェア

イオム oc イオムオリジナルセット ¥3,820,000

(取付料別)

- ・イオム SC 本体セット3ハンドピース仕様
- ・イオムターピンクリーンヘッドSL(ライト/カプリング付)
- ・イオムターピンクリーンヘッドTL(ライト/カプリング付)
- ・イオムマイクロモーター本体キット
- ・イオムストレートアタッチメント
- ・イオムラッチコントラ
- ・スプレービット4000DR/4000Asi(各ライトなし)
- ・イオム ライトO ユニットタイプ
- ・フットスイッチ
- ・フットコントローラー(円形タイプor 2ペダルタイプ)
- ・紙コップ対応オートコックor 噴水タイプ
- ・セントラルパキュ - ム仕様(オートセパレーター内蔵)
- ・デンタルフィルムビューアー
- ・トレール
- ・イオム カンターチェア

Functional Operation Space
DOCTOR UNIT



SLIDING DELIVERY



スムーズな移動。効率的な診療を実現します。

OVER ARM



ドクターユニットは立位、座位診療に対応。ホース類は最低位でも床をはずす衛生的です。

快適オペレーションを実現するドクターユニット。

ドクターユニットはスライディングデリバリーとオーバーアームの2種類のバリエーション。オペレーション技術を最大限に、そして多様に活かせる機能をつくしました。効率的な診療空間は、ドクターの負担を軽減します。

ドクターユニットは可動範囲が広く軽い操作でスムーズに移動します。ユニット全体の動きは操作パネルで手元集中管理できますので効率的です。ハンガーはシリンジを含む5ハンドピースが装備可能。診療形態に合わせてフレキシブルに選択できます。また、シリンジは右端・左端のいずれかをお選びいただけます。床を這わないホース長や取り外してオートクレーブ滅菌ができるハンドル、フラッシング機構内蔵等、衛生性にも充分配慮しました。



ハンドルは取り外してオートクレーブ滅菌が可能。



清掃性に優れたフラットな操作パネル。



ホース類は容易に着脱可能。清掃が簡単です。



光源に白色LED採用。クリアな画像が得られるデンタル用、パノラマ用フィルムビューアー。(オプション品)




2種類のフットコントローラー。(セレクト品)



エアータービンをはじめ、マイクロモーターや超音波スケーラー、シリンジのウォーター回路の洗浄機能付。(アダプターはオプション品)

ユニット全体の動きを手元集中管理。(デンタル用フィルムビューアーはオプション品)

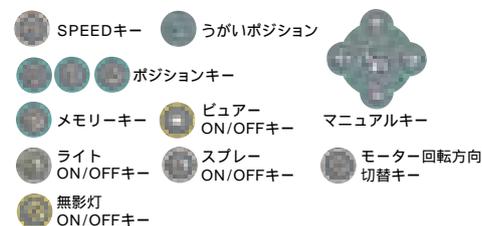


- 1 フラッシング機構 ON/OFFスイッチ
- 2 チップエア ON/OFFスイッチ
- 3 スーパーロー機構 左:トルク調整 右:回転数調整
- 4 エンド機構 ON/OFFスイッチ
- 5 スケーラー パワー調整



Make a Formation

ASSISTANT UNIT

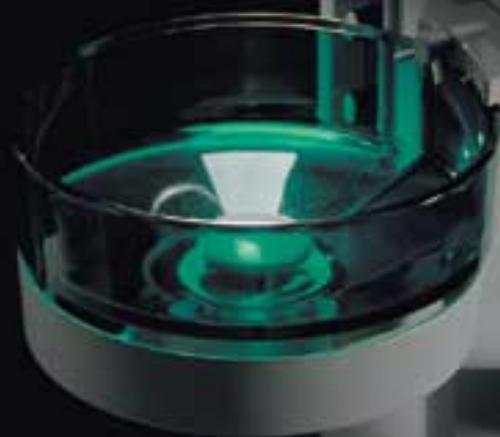

一歩先のベストアシスト機能。

デンタルスタッフとのリレーションシップも効率的な診療のポイントです。ドクターの動きをベストアシスト。ゆとりの機能で、コミュニケーションも広がります。

ウォーターユニットは、シンプルでスレンダーなデザインの省スペース設計です。

スピットンは可動式で、うがい時には手元に回転できます。回転時はチェアのオート作動がストップしますので安全です。

アシスタントユニットの操作パネルでも無影灯とチェアの操作が行えます。

アシスタントユニットには可視光線照射器も装備可能。

可動範囲が広く軽い操作でスムーズに動くバランスアームを採用。4ハンド診療、2ハンド診療、抜歯時など、さまざまな診療形態にベストアシストを約束します。



医院名等をアピールできる「カスタムプレート」をレイアウト。



ホースは最低位置でも床を這いません。




軽い動きのバランスアーム。



清潔感あふれるガラス製の可動式スピットン。



フリー回転で操作が容易なバキューム。吸引力が指先で調整できるスライド式スイッチです。

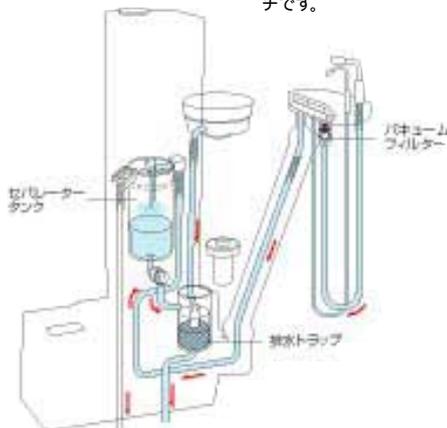

オートセパレーター内蔵
排水中の固形物は排水トラップで除去。排水管の詰まりがありません。セパレーター内は自動洗浄されますので定期的メンテナンスが不要です。

ウォーターユニット操作パネル



- メインキー
(スタンバイキー)
- コップ給水スイッチ
- スピットン洗浄スイッチ
- ウォーマースイッチ

給水・給気系操作パネル



- コップ給水調整ツマミ
- スピットン洗浄水調整ツマミ
- 外部給水調整ツマミ
- 外部給水コネクター
- 外部給気コネクター

アシスタントユニット操作パネル



- 無影灯ON/OFFキー
- うがいポジションキー
- ポジションキー

メインスイッチパネル



- メインスイッチ
- 給水元圧力計
- 給気元圧力計



Tender & Clear Functions
OPERATING LIGHT




コントロール自在、自然な照射光。

シャープな照射で、しかも患者さんに優しいオペレーティングライトです。

光量は5,000～20,000ルクスの無段階照度調整ができます(ライト)。
ワンタッチで照度が落とせるコンボジットモードを搭載しました。
衛生性に配慮してバランスアーム可動部からジャバラを排除。
ハンドルは容易に着脱ができ、オートクレーブ滅菌が可能です(ライト)。



調光ツマミを左右に回すと光量が調整できます。ツマミを押すとコンボジットモードに減光。もう一度押すと戻ります。

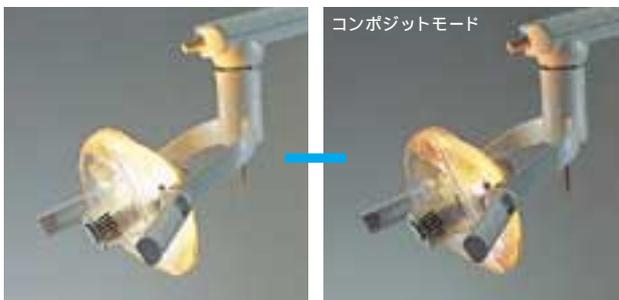

着脱可能なハンドル(ライト)