

装備一覧表
 ●：標準装備
 △：オプション
 ▲：工場オプション（ご注文時に申し受けます）

ドクターユニット	
ドクターユニット本体:フロアマウントタイプ	●
ドクターユニット3HP（モーター2回路）	●
ドクターハンガー（ピックアップ式）ホルダ5個	●
ドクターハンドシリコンカバー	●
イオムシリンジDr.	●
MGモーター本体、ホースキット（2セット）	●
Ti-X コントラ C1:5L（1本）	●
Ti-X コントラ C1:1L（1本）	●
Ti-X ストレート S1:1（1本）	●
ウルトラクリニックスケーラー：パリオス2 Lスケラー	●
ドクターパネル保護シート（10枚）	●
スーパーロー制御機構	●
ハンガー追加キット 一式（1HP追加する際に加算）	▲
タービンホースキット	▲
グリーンインパルス S-ML/S-SL	△
チタンXカブリングLED	△
カボ エキスパートトルク E680L	△
カボ エキスパートトルク ミニ E677L	△
カボ マルチフレックスLUXカブリング465LED	△
カボ マルチフレックスLUXカブリング460LED	△
Tiモーター S本体、ホースキット	▲
Tiモーター SL本体、ホースキット	▲
MGモーター本体、ホースキット	▲
MX2 PLUSモーター本体、ホースキット	▲
Ti-X ストレート S1:1	△
Ti-X コントラ C1:1/C1:1L	△
Ti-X コントラ C1:5/C1:5L	△
カボ エキスパートマティック E20C/E20L	△
カボ エキスパートマティック E10C	△
カボ エキスパートマティック E25C/E25L	△
ウルトラソニックスケーラー：パリオス2スケラー／パリオス2 Lスケラー	▲

ウルトラソニックスケーラー：EMS2スケラー／EMS2 Lスケラー	▲
ウルトラソニックスケーラー：ニュートロン スケーラー（ライトなし／ライト付）	▲
歯面清掃器:キット エアフロ－（緑上）	▲
歯面清掃器:キット エアフロ－（緑上・緑下）	▲
ジーシー 歯面清掃パウダー ＋	△
ジーシー 歯面清掃研磨パウダー	△
キット エアフロ－ ペリオフロ－ノズル（40本入）	△
口腔内カメラ:MyRay カム C-U2	▲
Gカム ハンガー	△
イオムシリンジ ディスボシリンジノズル用アダプタ付D用	△
イオムシリンジ ディスボシリンジノズル用アダプタ	△
ディスボシリンジノズル（250本入）	△
ユニットバーナーⅡ	△
液晶モニタステー（別途モニタ要）	△
デンキー・マウストレー	△
タービンガード（ピックアップ式）（ピックアップ式ドクターハンガー対応）	△
サイドトレイ	△
大型トレイ 右側ワイド	△
シリコンシートD	△
シリコンシートD 右側ワイド	△
トレイシートⅡ（50枚）	△
トレイシートⅡ（50枚） 右側ワイド	△
ペーパーバードレーシート	△
ドクターパネル保護シート（50枚）	△
バーナーケース保護シートⅡ ワイドタイプ（50枚）	△
デジタルケーブールキット:USB/USB+HDMI	▲

アシスタントユニット	
アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ	●
イオムシリンジAsi.	●
バキューム（広径タイプ）（ボールジョイント付）	●
ユニバーサルプロテクトカニュレ／プロフィラクシスカニュレ 搭載可	●
ユニバーサルプロテクトカニュレ	●
自動洗浄セパレータータンク	●
回転式スピットン（マニュアル）	●
カラー（セレクト）:ホワイト、抹茶	●
ヒータータンク	●
排水トラップ	●
オートコック給水（超音波センサ）	●
エジェクター	●
ツインターボクリーナーⅡ	●
ツインターボクリーナー液 750mL（1本）	●
フラッシングアダプタ（コップ給水対応）	●
アシスタントハンガー	●
アシスタントハンガーパネル（パネル保護シート（10枚））	▲
アシスタントパネル保護シート（50枚）	△
オートスピットン	▲
外部給水	▲
外部給気	▲
イオムシリンジ ディスボシリンジノズル用アダプタ付A用	△
バキューム（ボールジョイント付）L型バキュームチップ 搭載可	△
除菌フィルター エアー・水用	△
除菌フィルター エアー用	△
除菌フィルター 水用	△
液晶モニタアーム（別途モニタ要）	△
配管ボックス	△
ティシューケース:ライトボール用	△
エジェクターチップ（ディスボ）100本入	△
ユニバーサルプロテクトカニュレ	△
プロフィラクシスカニュレ	△
L型バキュームチップ	△

チェア	
チェア本体:ステップレスタイプ	●
ヘッドレスト（マニュアル）	
シートカラー（セレクト）:（標準色）抹茶、紅、栗（特別色）真珠	
フットコンローラー（セレクト）:円形ペダルタイプ、2ペダルタイプ	
フットスイッチ（チェアタイプ）	●
イオム FCコネク特	▲
イオム FCコネク特（追加キット）	△
パワーヘッドレスト アークタイプ	▲
フットスイッチ チェアタイプ パワーヘッドレスト切替スイッチ	▲
リラクゼーションシート“シフォン”	▲
アームレスト:右のみ/左のみ/左右組	▲

オペレーティングライト	
ライト本体:グローバルライトⅡ（LED）ユニットタイプ	●
ライトヘッドスイッチ:センサタイプ	●
ツイスト機能	●
ライトボール	●
ライトボール 液晶モニタアーム用	▲
ライトボール EXTARO 300仕様	▲

その他	
オペレーティングスツールOS-Ⅳ（ドクター用）	△
オペレーティングスツールOS-Ⅳ（アシスタント用）	△
メガネ置き	△
PC本体ケース	△
ツインターボクリーナー液750mL（1本/6本セット）	△
ジーシータービンスプレー（1本）	●
カボスプレー 2112A（1本）	△
パイプクリーナー-2000mL	△
クリーニングアダプターAD	△
オトルプラス	△
フロークリーナー	△

主な関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応 /135℃以下
グリーンインパルス
Ti-X コントラ/Ti-X ストレート
パリオス2/EMS2/ニュートロンスケラー
ハンドピース・チップ・レンチ
MX 2PLUS/MGモーター本体
歯面清掃器ハンドピース
シリンジノズル・カバー・ディスボシリンジノズルアダプタ
バキュームハンドピース・L型チップ・シリコンチップ
カニュレ
エジェクターハンドピース・チップ（金属製）
シリコンシート
ライトハンドルカバー


消毒用アルコールによる清拭消毒対応
チェアシート
ドクターユニット（トレイ・ハンガー・アーム）
アシスタントユニット（ハンガー・アーム）
操作パネル
オペレーティングライト（アーム・ボール）
タービン用カブリング（ライト付）
シリンジ本体
マイクロモーター本体（Tiモーター/Ti Sモーター）
ホース（タービン・モーター・バキューム・エジェクター）
スピットン（洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け）

ディスボサザブル
トレイシート
各パネル保護シート
ディスボシリンジノズル
エジェクターチップ（ディスボ）


＊詳しくは各製品の使用説明書にしたがい、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。

寸法図
 ●電源電圧 =AC100V 50/60Hz
 ●最大消費電力 =900VA
 ●使用空気圧 =0.5MPa
 ●使用水圧 =0.2MPa
 ●重量 =FL: 約 150kg


立面図
 寸法（1/50 縮寸）単位 :mm

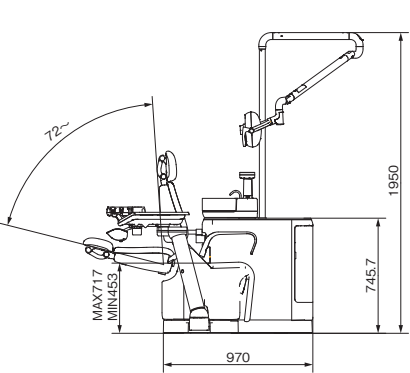

平面図
 寸法（1/50 縮寸）単位 :mm

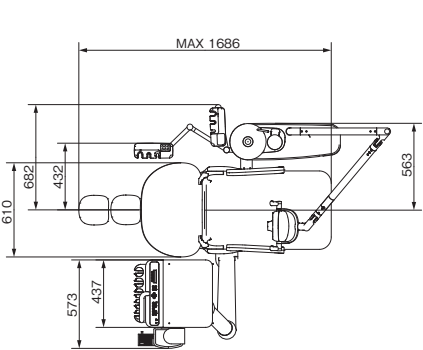


平面図
 寸法（1/50 縮寸）単位 :mm

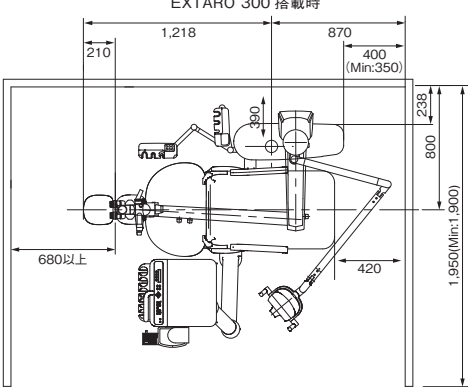

※天井高さ：2,400mm(施工可能) 推奨2,550mm
 取付後の本体高さ：2,300mm
 ※コントロールボックスから+100mmのクリアランスを推奨
 ※筐体上、周辺に梁、吊るしの照明などがないこと

メンテナンスをシンプルに。

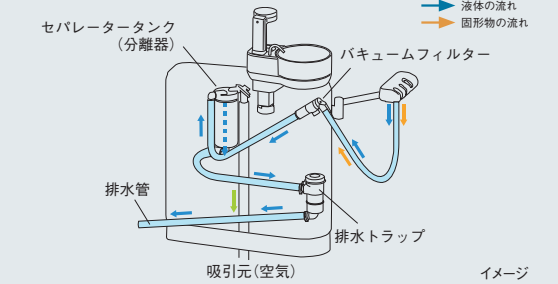

メンテナンスフリーの分離器を搭載。

ユニット内蔵型セパレーター（分離器）を標準装備。吸引された固形物をバキュームフィルターで除去し、液体は排水へと分離。さらに、排水トラップでも固形物を除去し、排水管の詰まりも防ぎます。タンク内は自動洗浄でメンテナンスフリーです。